


LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
INSTRUCTIVO PARA EL ENVIO DE BIOPSIAS RENALES CON KIT DE REACTIVOS


A) RETIRO DE REACTIVOS

El kit de reactivos debe ser retirado previamente desde el Laboratorio de Anatomía Patológica, ubicado en Marcoleta 377 piso 7, Santiago.


Preparación de reactivos del kit

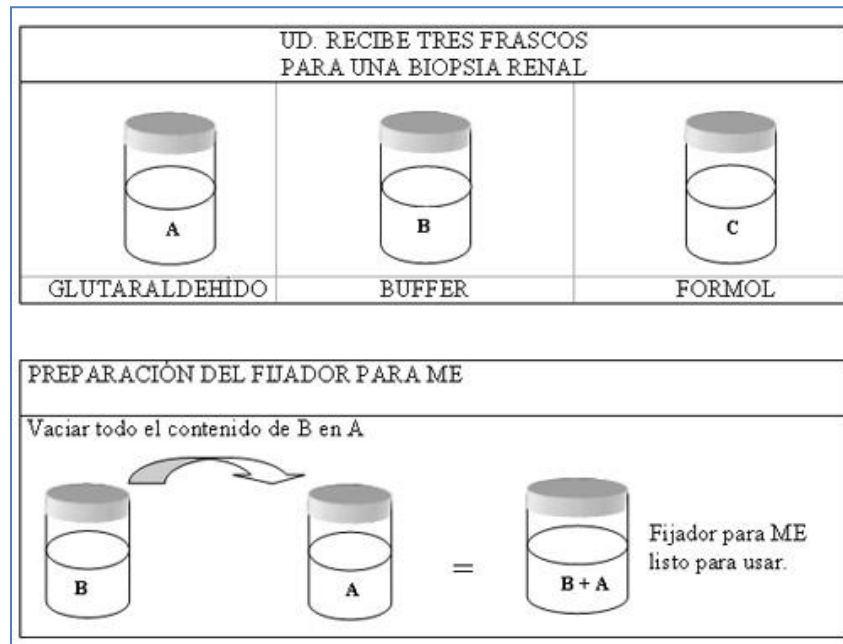


- 1.1. EN CASO DE TOMAR BIOPSIA POR PUNCIÓN:** El primer cilindro de tejido se coloca bajo la gota de glutaraldehído. El nefrólogo puede decidir que la primera muestra sea para inmunofluorescencia.

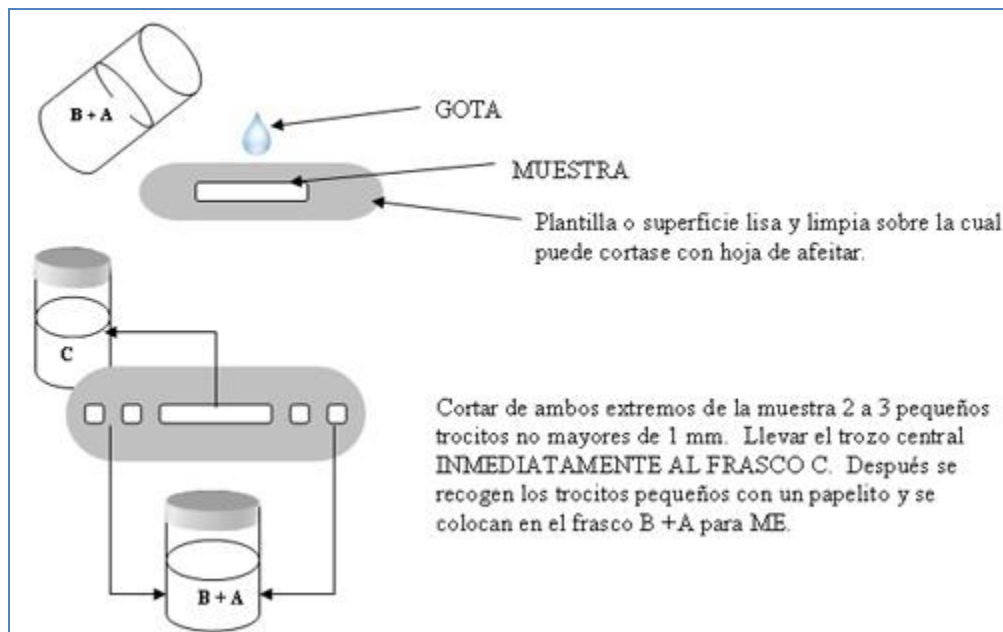

- 1.2. El **segundo cilindro** es la muestra para **INMUNOFLUORESCENCIA** el que se envuelve en gasa humedecida en SUERO FISIOLÓGICO (SF) y se coloca en el frasco B que está vacío, que no ha tenido contacto con algún fijador y se tapa para evitar que la muestra se seque.

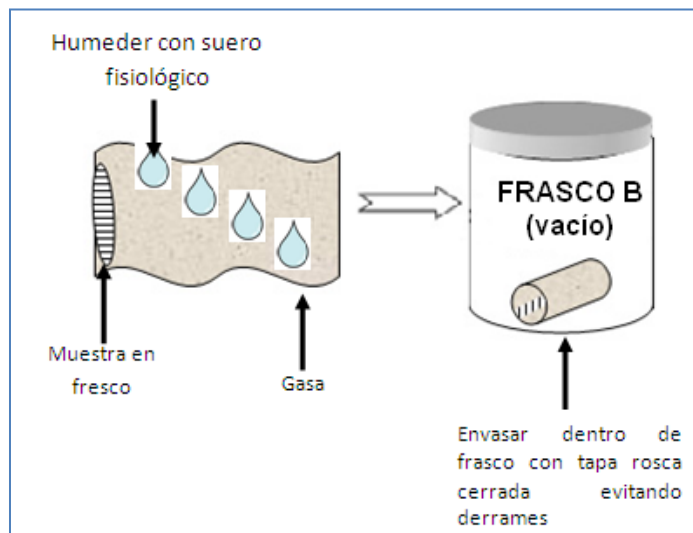

2. **CUANDO LA BIOPSIA ES QUIRÚRGICA:** Usted deberá cortar en una superficie limpia sin fijador, un trozo de corteza para IN el que envuelve en gasa húmeda en suero fisiológico y la guarda en el frasco B. Corta otro trozo para ML (C) y el restante bajo la gota de glutaraldehído del frasco B + A lo divide en trocitos no mayores a 1 mm y lo guarda en el frasco B + A.

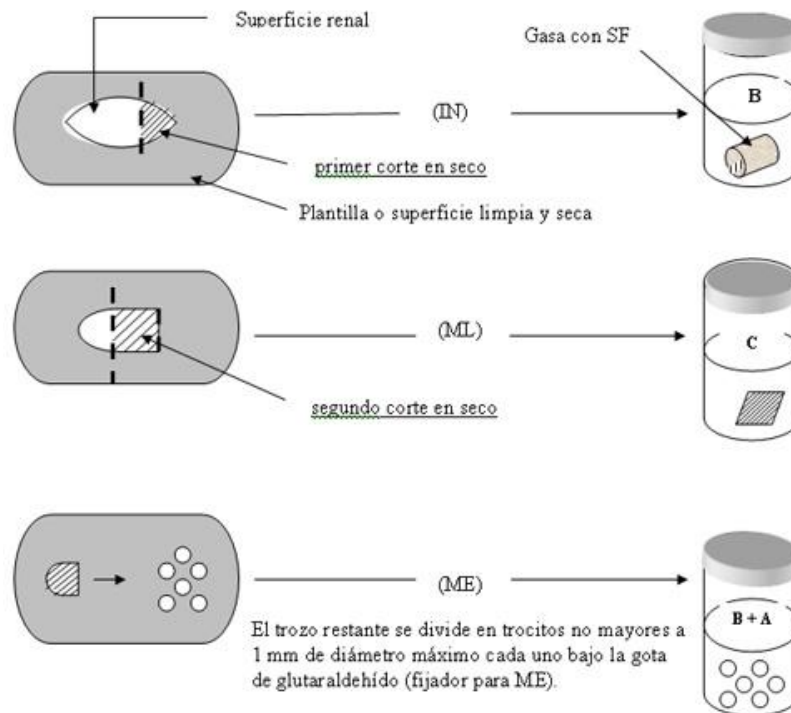

3. ENVÍO DE MUESTRAS

Una vez tomadas las muestras **enviarlas inmediatamente** al Laboratorio de Anatomía Patológica.

HORARIO DE RECEPCIÓN

Lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas.

4. CONTACTO CON ANATOMO PATOLOGO

Dr. Gonzalo Méndez O .. Anatomopatólogo-Patólogo Renal

Teléfono: (02) 2354 3203

E-mail: gmendez@med.puc.cl